



# Εγχειρίδιο χρήστη εφαρμογής

# Εισαγωγή

**Οι εφαρμογές ReSound έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσουν την ακουστική εμπειρία σας και να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά βοηθήματα ReSound τα οποία χρησιμοποιείτε.**

Η πρωτοποριακή ηχητική τεχνολογία και ο σχεδιασμός της ReSound περιέχονται σε μια πλήρη σειρά ακουστικών βοηθημάτων που κάνουν την ακοή μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Τα ακουστικά βοηθήματα διατίθενται αποκλειστικά από ακοολόγους και επαγγελματίες ακοής.

Οι εφαρμογές ReSound έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά βοηθήματα ReSound τα οποία χρησιμοποιείτε, παρέχοντάς σας νέους τρόπους ελέγχου, εξατομίκευσης και ανακούφισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για τις εφαρμογές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:  
**[www.resound.com/apps](http://www.resound.com/apps)**


Εάν θέλετε μια έντυπη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη της εφαρμογής, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή απλώς εκτυπώστε το παρόν εγχειρίδιο.



# Εύρεση και εγκατάσταση της εφαρμογής




## **Αποκτήστε πρόσβαση στις εφαρμογές για iPhone, iPad και iPod touch – κάντε λήψη από το App Store ακολουθώντας τα εξής βήματα:**

1. Εισέλθετε στο App Store πατώντας το εικονίδιο  του App Store σε ένα iPhone, iPad ή iPod touch
2. Μέσα στο App Store, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον όρο "ReSound" και το όνομα της εφαρμογής
3. Εάν χρησιμοποιείτε iPad, αλλάξτε τα κριτήρια αναζήτησης στην επάνω αριστερή γωνία σε "iPhone only" (iPhone μόνο)
4. Αφού βρείτε την εφαρμογή, πατήστε "Get" (Λήψη)
5. Έπειτα, πατήστε "Install" (Εγκατάσταση)
6. Εισαγάγετε ένα έγκυρο αναγνωριστικό Apple ID και τον κωδικό πρόσβασης
7. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, θα γίνει λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής ReSound
8. Μετά από τη λήψη, μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή στην οθόνη της κινητής συσκευής σας - πατήστε για να ανοίξει η εφαρμογή ReSound



## **Αποκτήστε πρόσβαση στις εφαρμογές για συσκευές Android – κάντε λήψη από το Google Play ακολουθώντας τα εξής βήματα:**

1. Εισέλθετε στο Google Play πατώντας το εικονίδιο  του Play Store στο τηλέφωνό σας Android.
2. Μέσα στο Google Play, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον όρο "ReSound" και το όνομα της εφαρμογής
3. Αφού βρείτε την εφαρμογή, πατήστε "Install" (Εγκατάσταση) και έπειτα "Accept" (Αποδοχή), ώστε να επιτρέψετε στην εφαρμογή την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως είναι το Bluetooth
4. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, θα γίνει λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής ReSound
5. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, πατήστε "Open" (Άνοιγμα) για να ανοίξει η εφαρμογή ReSound

# Εφαρμογή ReSound Smart 3D™



Η εφαρμογή ReSound Smart 3D προσφέρει απaráμιλλη φιλικότητα προς τον χρήστη με ένα μόνο πάτημα. Ελέγξτε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του ακουστικού σας βοηθήματος απευθείας από την κινητή συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να εξατομικεύσετε την ακουστική εμπειρία σας ανάλογα με το ακουστικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη να λαμβάνετε προγράμματα των ακουστικών σας βοηθημάτων, ενημερωμένα από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας και να λαμβάνετε ενημερώσεις των ακουστικών βοηθημάτων εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε την κλινική (διατίθεται σε επιλεγμένες αγορές). Η εφαρμογή θα σας καθοδηγεί για όλα όσα μπορείτε να κάνετε και για το πώς θα τα κάνετε.

Η εφαρμογή ReSound Smart 3D είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play.

## Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, χρειάζεστε τις ακόλουθες συσκευές:

### Ακουστικά βοηθήματα:

- Ακουστικά βοηθήματα ReSound Smart\*: ReSound LiNX 3D ή μεταγενέστερης έκδοσης.

### Κινητές συσκευές:

- iPhone, iPad ή iPod touch. Η εφαρμογή ReSound Smart 3D είναι συμβατή και με το Apple Watch.
- Υποστηριζόμενες συσκευές Android.


Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για συγκεκριμένες πληροφορίες συμβατότητας και για μια ενημερωμένη λίστα με τις συμβατές κινητές συσκευές:

**[www.resound.com/compatibility](http://www.resound.com/compatibility)**

\*Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βοηθήματα έχουν ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού. Ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό του ακουστικού σας βοηθήματος για εσάς.



# Λειτουργικότητα εφαρμογής ReSound Smart 3D™

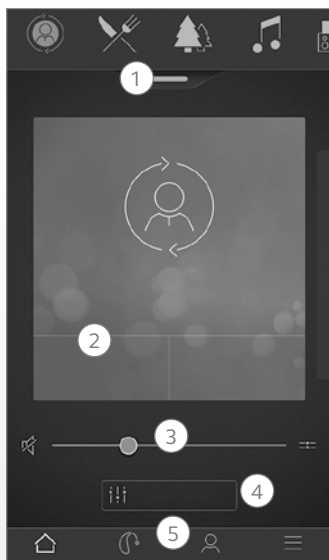


\*Διατίθεται στο ReSound LiNX 3D 9 και το ReSound ENZO 3D 9.

\*\*Διατίθεται εάν το Tinnitus Sound Generator έχει ενεργοποιηθεί από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας.


Κύρια οθόνη:

1. Χρησιμοποιήστε την επάνω γραμμή κύλισης, την **αναπτυσσόμενη λίστα** ή τη διάταξη σάρωσης κάρτας για να επιλέξετε το δικό σας ακουστικό βοήθημα ή το πρόγραμμα ροής ήχου ή τα Αγαπημένα σας. Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επεξεργαστείτε προγράμματα και Αγαπημένα.
2. Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά γρήγορης πρόσβασης** για σύνθετες προσαρμογές ήχου με ένα πάτημα.
3. Προσαρμόστε την **ένταση** ήχου ή εφαρμόστε ένταση.
4. Μεταβείτε στην **Ενίσχυση ήχου** για να προσαρμόσετε τα πρίμα/μεσαία/μπάσα, τη μείωση θορύβου, την εστίαση στην ομιλία ή τη μείωση του θορύβου από τον αέρα\*. Μεταβείτε επίσης στο πρόγραμμα διαχείρισης εμβοιών για να προσαρμόσετε το βήμα και τη διακύμανση του ήχου από το Tinnitus Sound Generator ή επιλέξτε το δικό σας Nature Sound\*\*.
5. **Μενού πλοήγησης.**

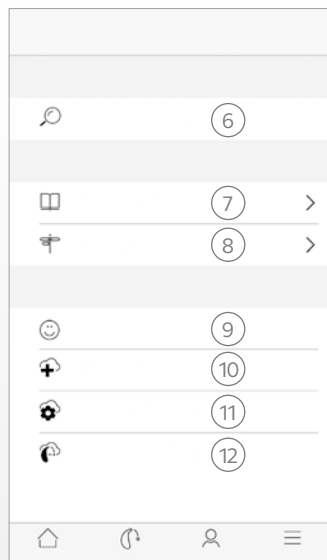

Μενού "Το δικό μου":

6. Βρείτε το **ακουστικό βοήθημα που έχετε χάσει**.
7. **Μάθετε σχετικά με την εφαρμογή** και τις λειτουργίες της.
8. **Συμβουλές καθοδήγησης** για τη χρήση της εφαρμογής και των ακουστικών βοηθημάτων.
9. **Αξιολόγηση του ήχου μου** Στείλτε στον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας μια αξιολόγηση των ρυθμίσεων ήχου σας.
10. **Ζητήστε βοήθεια** από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας, σχετικά με τις ρυθμίσεις και τα προγράμματα των ακουστικών σας βοηθημάτων.
11. Δείτε την **κατάσταση των αιτημάτων σας και εγκαταστήστε ρυθμίσεις και ενημερώσεις προγραμμάτων** που σας στέλνει ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας. Επιστροφή στις προηγούμενες ρυθμίσεις.
12. **Εγκαταστήστε νέο λογισμικό** που λαμβάνετε για τα ακουστικά σας βοηθήματα.

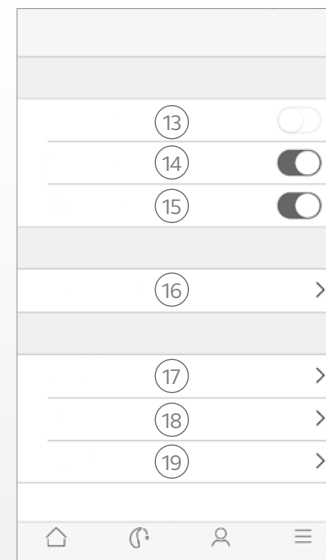

Μενού "Περισσότερα"

13. Είσοδος/Έξοδος από τη **Λειτουργία επίδειξης**.
14. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση **Συμβουλών καθοδήγησης**.
15. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση **Αυτόματης ενεργοποίησης των αγαπημένων θέσεων**.
16. **Ρυθμίσεις του Apple Watch:** Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας για την εφαρμογή Watch.
17. **Πληροφορίες:** Διαβάστε σχετικά με την εφαρμογή και την επωνυμία.
18. **Νομικές πληροφορίες:** Μάθετε σχετικά με τον κατασκευαστή, τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου. Επανεξετάστε, εκχωρήστε ή ανακαλέστε τη συναίνεσή σας για επεξεργασία δεδομένων.
19. **Υποστήριξη:** Περισσότερη βοήθεια για την εφαρμογή και πρόσθετοι σύνδεσμοι προς την ηλεκτρονική βοήθεια και τις συνήθεις ερωτήσεις.

## Προβλεπόμενη χρήση των εφαρμογών για κινητές συσκευές:

Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές προορίζονται για χρήση μαζί με ασύρματα ακουστικά βοηθήματα. Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές αποστέλλουν και λαμβάνουν σήματα από τα ασύρματα ακουστικά βοηθήματα μέσω κινητών συσκευών για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί οι εφαρμογές.

CE  
0297

GN ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Δανία

Οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την Οδηγία της ΕΕ περί ιατρικών συσκευών 93/42/ΕΟΚ πρέπει να απευθύνονται στη GN ReSound A/S.

# Εφαρμογή ReSound Smart™



Η εφαρμογή ReSound Smart σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε βασικά στοιχεία ελέγχου και πιο σύνθετες δυνατότητες, ώστε να μπορείτε να εξατομικεύσετε την ακουστική εμπειρία σας.

Η εφαρμογή ReSound Smart ήταν η πρώτη εφαρμογή για ακουστικά βοηθήματα με απευθείας σύνδεση μεταξύ των ακουστικών βοηθημάτων και του κινητού τηλεφώνου.

Η εφαρμογή ReSound Smart είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play.

## Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, χρειάζεστε τις ακόλουθες συσκευές:

### Ακουστικά βοηθήματα:

- Ακουστικά βοηθήματα ReSound Smart\*: ReSound LiNX<sup>2</sup>, ReSound LiNX, ReSound LiNX TS, ReSound ENZO<sup>2</sup>, ReSound ENZO ή ReSound Up Smart.

### Κινητές συσκευές:

- iPhone, iPad ή iPod touch. Η εφαρμογή ReSound Smart είναι συμβατή και με το Apple Watch.
- Υποστηριζόμενες συσκευές Android.


Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για συγκεκριμένες πληροφορίες συμβατότητας και για μια ενημερωμένη λίστα με τις συμβατές κινητές συσκευές:

**[www.resound.com/compatibility](http://www.resound.com/compatibility)**

\*Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βοηθήματα έχουν ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού. Ο ειδικός σας σε θέματα ακουστικής υγείας μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό του ακουστικού σας βοηθήματος για εσάς.



# Λειτουργικότητα εφαρμογής ReSound Smart™

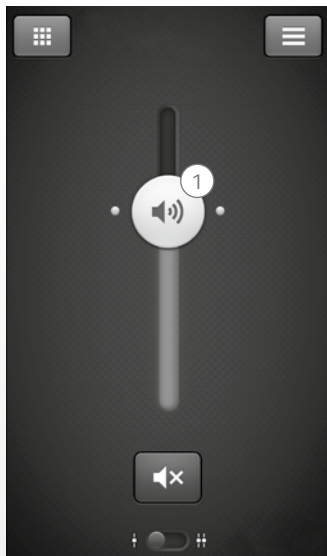

1. Απενεργοποιήστε τον ήχο ή ρυθμίστε την **έντασή** του και για τα δύο ακουστικά βοηθήματα ή για το καθένα ακουστικό βοήθημα ξεχωριστά.



2. Αλλαγή **προγραμμάτων** μη αυτόματης λειτουργίας και συσκευής ροής.

3. Προσαρμογή **πρίμων και μπάσων** στις προτιμήσεις σας.


4. Δημιουργία **Αγαπημένων** για αποθήκευση του προγράμματος και των ρυθμίσεων της προτίμησής σας. Συσχέτιση ενός Αγαπημένου με μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

5. Χρήση της **ενίσχυσης ήχου** για σύνθετες ρυθμίσεις: Άνεση σε θόρυβο, εστίαση σε ομιλία και άνεση σε άνεμο\*.

6. Χρήση του **προγράμματος διαχείρισης εμβοών** για τη ρύθμιση του βήματος και της διακύμανσης του ήχου από το Tinnitus Sound Generator\*\*.

Χρήση του προγράμματος διαχείρισης εμβοών για την επιλογή του προτιμώμενου Nature Sound™\*\*.

\*Διατίθεται στο ReSound LiNX<sup>2</sup> 9 και το ReSound ENZO<sup>2</sup> 9.  
\*\*Διατίθεται στο ReSound LiNX<sup>2</sup> και το ReSound ENZO<sup>2</sup> εάν το Tinnitus Sound Generator έχει ενεργοποιηθεί από τον ειδικό σας σε θέματα ακουστικής υγείας.

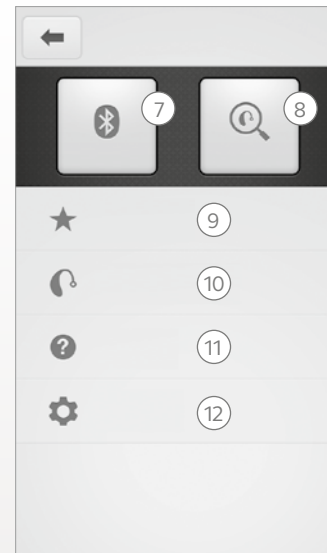

7. **Σύνδεση:** Προβολή κατάστασης μπαταρίας και σύνδεσης.

8. **Εύρεση:** Βοήθεια εντοπισμού ακουστικών βοηθημάτων που έχουν χαθεί ή τοποθετηθεί σε λάθος μέρος.

9. **Αγαπημένα:** Εμφάνιση προεπισκόπησης ή επεξεργασία ή διαγραφή των αποθηκευμένων Αγαπημένων.

10. **Το ακουστικό μου βοήθημα:** Βρείτε εξατομικευμένες πληροφορίες για τα ακουστικά σας βοηθήματα.

11. **Εκμάθηση:** Η εκμάθηση που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή σας καθοδηγεί στις δυνατότητες της εφαρμογής.

12. **Ρυθμίσεις:** Επεξεργασία και εξατομίκευση των ονομάτων των προγραμμάτων, διαγραφή όλων των αγαπημένων, είσοδος και έξοδος στη λειτουργία επίδειξης και εμφάνιση πληροφοριών παρασκηνίου σχετικά με την εφαρμογή.

## Προβλεπόμενη χρήση των εφαρμογών για κινητές συσκευές:

Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές προορίζονται για χρήση μαζί με ασύρματα ακουστικά βοηθήματα. Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές αποστέλλουν και λαμβάνουν σήματα από τα ασύρματα ακουστικά βοηθήματα μέσω κινητών συσκευών για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί οι εφαρμογές.

CE  
0297

GN ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Δανία

Οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την Οδηγία της ΕΕ περί ιατρικών συσκευών 93/42/EOK πρέπει να απευθύνονται στη GN ReSound A/S.



# Εφαρμογή ReSound Control™



Η εφαρμογή ReSound Control παρέχει τον έλεγχο των ακουστικών σας βοηθημάτων.

Το ReSound Control, το οποίο χρησιμοποιείται με το κλιπ τηλεφώνου Phone Clip+, σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας ώστε να αποκτάτε εύκολα μια επισκόπηση και τη δυνατότητα τηλεχειρισμού των ασύρματων ακουστικών βοηθημάτων ReSound και των ασύρματων εξαρτημάτων ReSound.

Η εφαρμογή ReSound Control είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play.

## Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, χρειάζεστε τις ακόλουθες συσκευές:

### Ακουστικά βοηθήματα:

- Ασύρματα ακουστικά βοηθήματα ReSound.

### Ασύρματο εξάρτημα:

- Κλιπ τηλεφώνου ReSound Phone Clip+.

### Κινητές συσκευές:

- iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 7 ή νεότερη έκδοση.
- Συσκευές Android\* με Android OS 2.3.5 ή νεότερη έκδοση.

Για τη βέλτιστη απόδοση, η εφαρμογή ReSound Control δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ενεργά σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές ταυτόχρονα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα

[www.resound.com/control](http://www.resound.com/control)






# Λειτουργικότητα εφαρμογής ReSound Control™



**1. Απενεργοποιήστε τον ήχο ή ρυθμίστε την έντασή του** στα ασύρματα ακουστικά βοηθήματα. Απενεργοποιήστε τον ήχο ή ρυθμίστε την έντασή του στα ασύρματα εξαρτήματα.

2. Χρησιμοποιήστε την αποκλειστική **οθόνη σύνδεσης** για την επισκόπηση των συνδέσεων μεταξύ της εφαρμογής και των ακουστικών σας βοηθημάτων.

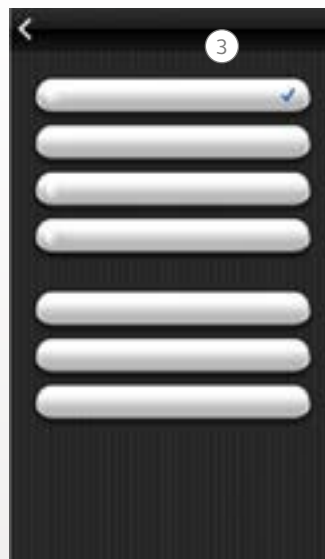

**3. Αλλαγή προγραμμάτων μη αυτόματης λειτουργίας και συσκευής ροής.**

## Προβλεπόμενη χρήση των εφαρμογών για κινητές συσκευές:

Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές προορίζονται για χρήση μαζί με ασύρματα ακουστικά βοηθήματα. Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές αποστέλλουν και λαμβάνουν σήματα από τα ασύρματα ακουστικά βοηθήματα μέσω κινητών συσκευών για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί οι εφαρμογές.

CE  
0297

GN ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Δανία

Οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την Οδηγία της ΕΕ περί ιατρικών συσκευών 93/42/ΕΟΚ πρέπει να απευθύνονται στη GN ReSound A/S.

# Εφαρμογή ReSound Relief™



Η εφαρμογή ReSound Relief προσφέρει εξισορροπημένη και ευέλικτη διαχείριση των εμβών. Χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ήχων και ασκήσεων χαλάρωσης που σκοπό έχουν να αποσπάσουν τον εγκέφαλό σας από την εστίαση στις εμβές. Με την πάροδο του χρόνου, ο εγκέφαλος μαθαίνει να εστιάζει λιγότερο στις εμβές. Επιπλέον, επτά δεξιότητες αντιμετώπισης αναπτύσσονται στα στοιχεία συμβούλευσης και θεραπείας της εφαρμογής, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση και την κατανόηση των εμβών.

Η εφαρμογή είναι ένα εργαλείο για οποιονδήποτε παρουσιάζει εμβές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα διαχείρισης εμβών ή ένα σχέδιο διαμορφωμένο από έναν ειδικό σε θέματα ακουστικής υγείας.

Η εφαρμογή ReSound Relief είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play.

## **Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, χρειάζεστε τις ακόλουθες συσκευές:**

### *Ακουστικά βοηθήματα:*

- Ακουστικά βοηθήματα ReSound Smart για απευθείας ροή ήχου από ένα iPhone, iPad ή iPod touch ή ασύρματα ακουστικά βοηθήματα ReSound σε συνδυασμό με ένα Phone Clip+ για απευθείας ροή ήχου σε συσκευές Android.

### *Κινητές συσκευές:*

- iPhone, iPad ή iPod touch.
- Συσκευές Android\* με Android OS 4.4 ή νεότερη έκδοση.

### *Ακουστικό:*

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μαζί με ένα τυπικό ακουστικό συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

**[www.resound.com/reliefapp](http://www.resound.com/reliefapp)**



# Λειτουργικότητα εφαρμογής ReSound Relief™



Η εφαρμογή σας επιτρέπει τη διαχείριση της προσωπικής σας βιβλιοθήκης αρχείων θεραπειάς ήχου και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε τα δικά σας ακούσματα από περιβαλλοντικούς ήχους και σύντομα μουσικά κομμάτια.



## **1. Ηχοθεραπεία:**

Ακρόαση, δημιουργία και λήψη ήχων

## **2. Θεραπείες:**

Εύρεση διαφόρων θεραπειών που σας βοηθούν να χαλαρώσετε.

## **3. Μάθηση:**

Εύρεση πληροφοριών για τις εμβοές.

## **4. My Relief:**

Παρακολούθηση της χρήσης της εφαρμογής.

## **Προβλεπόμενη χρήση της εφαρμογής:**

Η εφαρμογή προορίζεται για την παροχή θεραπείας ήχου και ασκήσεων χαλάρωσης που αποσκοπούν στην απόσπαση της εστίασης του ασθενούς από τις εμβοές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος διαχείρισης εμβοών. Δεν προβλέπεται για χρήση σε ακοολογική/οντολογική θεραπεία συμπτωματικών εμβοών ή για την κάλυψη εσωτερικών θορύβων.



## **Προειδοποίηση για τις εμβοές**

Για την αποτροπή ενδεχόμενης απώλειας ακοής, αποφύγετε να ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για παρατεταμένα διαστήματα.



GN ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Δανία

Οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την Οδηγία της ΕΕ περί ιατρικών συσκευών 93/42/EOK πρέπει να απευθύνονται στη GN ReSound A/S.

# Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

## Χρήση με εφαρμογές για κινητές συσκευές:

Οι ειδοποιήσεις για ενημερώσεις των εφαρμογών δεν θα πρέπει να απενεργοποιηθούν. Συστήνεται η εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων από τον χρήστη, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η ενημερωμένη έκδοση των εφαρμογών.

Η εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μαζί με συσκευές ReSound για τις οποίες προορίζεται. Η ReSound δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής με άλλες συσκευές.

## Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Φροντίστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη του ακουστικού βοηθήματος προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ReSound μαζί με το ακουστικό βοήθημα. Το εγχειρίδιο χρήστη του ακουστικού βοηθήματος συμπεριλαμβανόταν στο πακέτο του ακουστικού βοηθήματος. Εάν χρειάζεστε νέο αντίτυπο, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης πελατών της ReSound.

Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες που φέρουν το σύμβολο προειδοποίησης



Η λέξη **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** δηλώνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Η λέξη **ΠΡΟΣΟΧΗ** δηλώνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρής και μέτριας σοβαρότητας τραυματισμούς.



#### **Παγκόσμια κεντρικά γραφεία**

GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Δανία

Τηλ.: +45 45 75 11 11

resound.com

© 2017 GN Hearing A/S. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Η ονομασία ReSound είναι εμπορικό σήμα της GN Hearing A/S. Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες iPhone, iPad, iPod touch και Apple Watch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η ονομασία App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc, κατατεθέν στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Οι ονομασίες Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Το ρομπότ Android αναπαράχθηκε ή τροποποιήθηκε από έργο που δημιουργήθηκε και κοινοποιήθηκε από την Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην άδεια ανάθεσης της Creative Commons 3.0. Το λεκτικό σήμα Bluetooth και τα λογότυπα είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc.

ReSound GN

