



Manual do usuário do aplicativo

Apresentação


Os aplicativos ReSound foram desenvolvidos para aprimorar sua experiência auditiva e permitir que você aproveite melhor seus aparelhos auditivos ReSound.

O design e a tecnologia sonora inovadores da ReSound vêm em uma linha completa de aparelhos auditivos que tornam a audição uma experiência mais agradável. Os aparelhos auditivos estão disponíveis exclusivamente por meio de audiologistas e profissionais de audiologia.

Os aplicativos ReSound permitem que você aproveite melhor seus aparelhos auditivos ReSound, oferecendo novas maneiras de obter controle, personalização e alívio.

Para obter mais informações e ajuda em relação ao manual do usuário dos aplicativos, acesse o site: **www.resound.com/apps**

Para obter uma versão impressa do manual do usuário do aplicativo, contate o suporte ao cliente ou simplesmente imprima este manual.

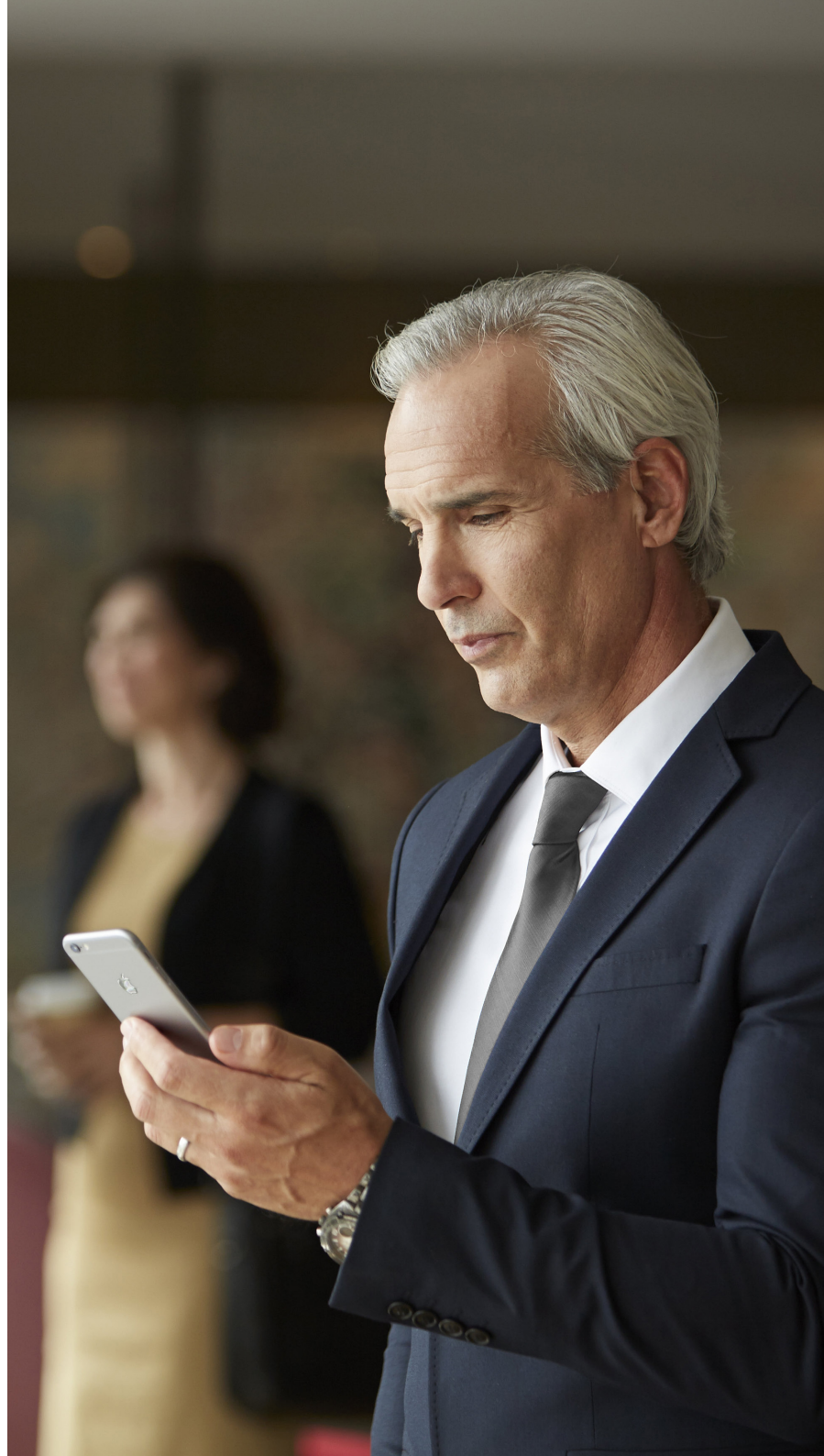

Como localizar e instalar o aplicativo




Aplicativos de acesso para iPhone, iPad e iPod touch – faça o download na App Store seguindo este procedimento:

1. Entre na App Store, clicando no ícone App Store  no iPhone, iPad ou iPod touch
2. Na App Store, pesquise por “ReSound” e pelo nome do aplicativo
3. Se estiver usando o iPad, altere o critério de busca no canto superior esquerdo para “iPhone only”
4. Após achar o aplicativo, clique em “Obter”
5. Em seguida, clique em “Instalar”
6. Insira um ID e senha Apple válidos
7. Após inserir a senha, o aplicativo ReSound Smart será baixado e instalado
8. Após o download, você poderá encontrar o aplicativo na tela do dispositivo móvel – toque para abrir o aplicativo ReSound



Aplicativos de acesso para dispositivos Android – faça download na Google Play seguindo este procedimento:

1. Entre na Google Play tocando no ícone da Play Store  em seu telefone Android.
2. No Google Play, pesquise por “ReSound” e pelo nome do aplicativo
3. Ao encontrar o aplicativo, toque em “Instalar”, seguido de “Aceitar”, para permitir que o aplicativo acesse determinados recursos em seu telefone, como o Bluetooth
4. Após inserir a senha, o aplicativo ReSound Smart será baixado e instalado
5. Ao fim da instalação, toque em “Abrir” para abrir o aplicativo ReSound

Aplicativo ReSound Smart 3D™ app



O aplicativo ReSound Smart 3D oferece facilidade inigualável ao usuário, com apenas um toque. Controle e personalize as configurações do seu aparelho auditivo diretamente de seu celular, para personalizar sua experiência auditiva de acordo com seus ambientes acústicos. O audiologista também pode atualizar os programas do aparelho auditivo e você pode receber as atualizações do aparelho auditivo remotamente sem ter que se deslocar. O aplicativo fornecerá orientações sobre tudo o que pode ser feito e como fazer.

O aplicativo ReSound Smart 3D está disponível na App Store e no Google Play.

Para usar o aplicativo, você precisa dos seguintes dispositivos:

Hearing Aids:

- Aparelhos auditivos ReSound Smart*: ReSound LiNX 3D ou versão posterior.


Dispositivos móveis:

- iPhone, iPad ou iPod touch. O aplicativo ReSound Smart 3D também é compatível com o Apple Watch.
- Dispositivos móveis Android aceitos.


Visite nosso site para obter informações específicas sobre compatibilidade e uma lista atualizada dos dispositivos compatíveis:

www.resound.com/compatibility

*Certifique-se de que os aparelhos auditivos estão atualizados com a versão mais recente de firmware. Seu audiologista poderá atualizá-lo para você.

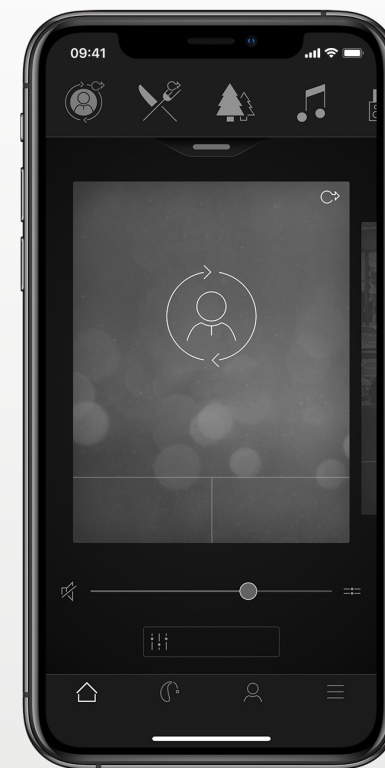

Funcionalidade do aplicativo ReSound Smart 3D

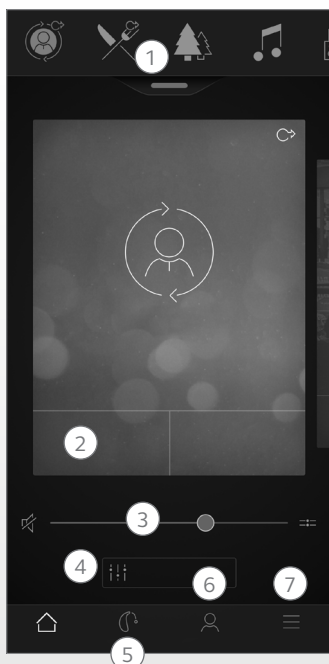

Tela principal:

1. Utilize o carrossel superior, o **menu suspenso** ou os cartões para escolher seu aparelho auditivo ou programa transmissor, ou ainda seu Favorito. Tocar no menu suspenso para editar programas e Favoritos.
2. Utilize os **Botões de acesso rápido** para ajustes avançados de som com um único toque.
3. Ajuste ou silencie o **volume**.
4. Acesse o **Realçador de sons** para ajustar agudos/médios/graves, redução de ruído, foco na fala ou redução de ruído de vento*. Acessar o Gerenciador de Zumbido para ajustar o tom e a variação do som do Gerador de Som para Zumbido, ou escolher seu Som da Natureza**.
5. **Menu de navegação**.
6. O menu **“My”** (meu):
Aqui, é possível **aprender** o que o aplicativo é capaz de fazer e **contatar o seu audiologista*** para solicitar ajuda e receber atualizações aos ajustes de seu aparelho auditivo.
7. O menu **“More”** (mais):
Aqui, é possível ajustar as configurações do aplicativo e encontrar informações adicionais sobre o seu aplicativo.

*A disponibilidade dos recursos depende do modelo do aparelho auditivo e da adaptação feita pelo seu audiologista.

**Disponível se o Gerador de Som para Zumbido tiver sido habilitado por seu audiologista.

Finalidade do uso de aplicativos de dispositivos móveis:

Os aplicativos de dispositivos móveis foram desenvolvidos para o uso com os aparelhos auditivos wireless. Os aplicativos de dispositivos móveis enviam e recebem sinais dos aparelhos auditivos sem fio por meio dos smartphones para os quais foram desenvolvidos.

CE
0297

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Em caso de dúvidas em relação à Diretriz de Equipamentos Médicos EU 93/42/EEC, entrar em contato com a GN ReSound A/S.

Aplicativo ReSound Smart™ app



O aplicativo ReSound Smart oferece a mesma interface de usuário fácil fornecida pelo ReSound Smart 3D, para controlar e realizar ajustes aos seus aparelhos auditivos. Este aplicativo conecta-se aos aparelhos auditivos da ReSound que não são compatíveis com o ReSound Assist.

O aplicativo ReSound Smart está disponível na App Store e no Google Play.

Para usar o aplicativo, você precisa dos seguintes dispositivos:

Hearing Aids:

- Aparelhos auditivos ReSound Smart*: ReSound LiNX², ReSound LiNX, ReSound LiNX TS, ReSound ENZO², ReSound ENZO ou ReSound Up Smart.

Dispositivos móveis:

- iPhone, iPad ou iPod touch. O aplicativo ReSound Smart também é compatível com o Apple Watch.
- Dispositivos móveis Android aceitos.

Visite nosso site para obter informações específicas sobre compatibilidade e uma lista atualizada dos dispositivos compatíveis: www.resound.com/compatibility

*Certifique-se de que os aparelhos auditivos estão atualizados com a versão mais recente de firmware. Caso contrário, seu audiologista poderá atualizá-lo para você.


Finalidade do uso de aplicativos de dispositivos móveis:

Os aplicativos de dispositivos móveis foram desenvolvidos para o uso com os aparelhos auditivos wireless. Os aplicativos de dispositivos móveis enviam e recebem sinais dos aparelhos auditivos sem fio por meio dos smartphones para os quais foram desenvolvidos.

CE
0297

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Em caso de dúvidas em relação à Diretriz de Equipamentos Médicos EU 93/42/EEC, entrar em contato com a GN ReSound A/S.

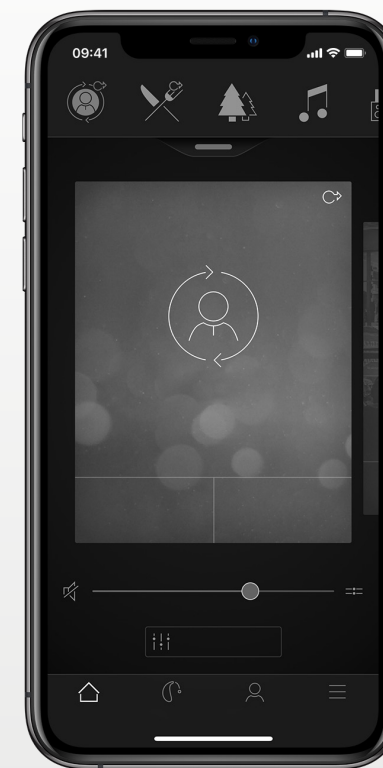

Aplicativo ReSound Control



O aplicativo ReSound Control permite controlar seus aparelhos auditivos.

Usado com o Phone Clip+, o ReSound Control permite que você use seu dispositivo móvel para obter facilmente uma visão geral e controlar remotamente seus aparelhos auditivos sem fio ReSound e os acessórios sem fio ReSound.

O aplicativo ReSound Control está disponível na App Store e no Google Play.

Para usar o aplicativo, você precisa dos seguintes dispositivos:

Hearing Aids:

- Aparelhos auditivos wireless ReSound

Acessório sem fio:

- ReSound Phone Clip+.

Dispositivos móveis:

- iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 7 ou superior.
- Dispositivos Android* com OS 2.3.5 ou posterior.

Para um melhor desempenho, o aplicativo ReSound Control não deve ser usado ativamente em mais de um celular ao mesmo tempo.

Para obter mais informações, acesse www.resound.com/control

*Funcionalidade verificada em modelos selecionados de HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung e Sony.



Funcionalidade do aplicativo ReSound Control



1. **Ajuste ou silencie o volume** em seus aparelhos auditivos wireless. Ajuste ou silencie o volume em seus acessórios sem fio.

2. Use a **tela de link exclusiva** para ter uma visão geral das conexões entre o aplicativo e seus aparelhos auditivos.

3. **Troque o programa manual e de transmissão.**

Finalidade do uso de aplicativos de dispositivos móveis:

Os aplicativos de dispositivos móveis foram desenvolvidos para o uso com os aparelhos auditivos wireless. Os aplicativos de dispositivos móveis enviam e recebem sinais dos aparelhos auditivos sem fio por meio dos smartphones para os quais foram desenvolvidos.

CE
0297

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Em caso de dúvidas em relação à Diretriz de Equipamentos Médicos EU 93/42/EEC, entrar em contato com a GN ReSound A/S.

Aplicativo ReSound Relief™



O aplicativo ReSound Relief oferece gerenciamento do zumbido equilibrado e flexível. Ele utiliza uma combinação de sons e exercícios relaxantes criados para evitar que seu cérebro foque no zumbido. Com o tempo, o cérebro aprende a focar menos no zumbido. Além disso, sete habilidades expandem os elementos de consulta e terapia do aplicativo, oferecendo dicas interessantes para gerenciar e compreender o zumbido.

O aplicativo é uma ótima ferramenta para qualquer pessoa que sofra de zumbido. Ele deve ser usado em conjunto com um programa ou plano de gerenciamento de zumbido configurado por um audiologista.

O aplicativo ReSound Relief está disponível na App Store e no Google Play.

Para usar o aplicativo, você precisa dos seguintes dispositivos:

Hearing Aids:

- Aparelhos auditivos ReSound Smart para transmissão direta de um iPhone, iPad ou iPod touch ou aparelhos auditivos ReSound habilitados para sem fio, em conjunto com um acessório Phone Clip+ para transmissão de áudio direta em dispositivos Android.


Dispositivos móveis:

- iPhone, iPad ou iPod touch.
- Dispositivos Android executando Android OS 4.4 ou posterior.


Fone de ouvido:

- Você também pode usar o aplicativo com um fone de ouvido padrão conectado ao telefone.

Para obter mais informações, visite: www.resound.com/reliefapp

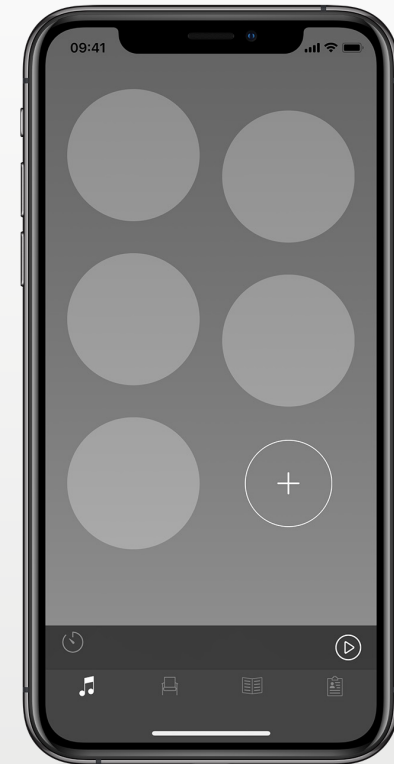

Funcionalidade do aplicativo ReSound Relief

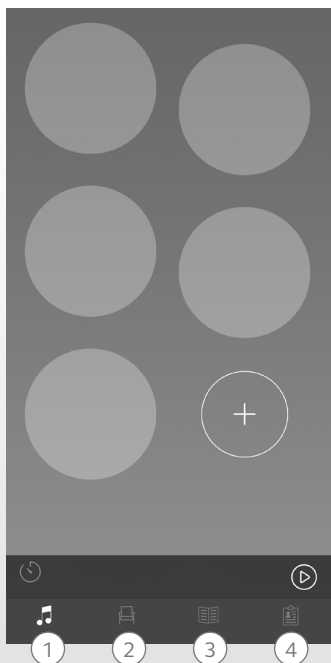

O aplicativo permite que você gerencie sua biblioteca pessoal de arquivos de terapia sonora e crie suas próprias paisagens sonoras a partir de sons ambientais e pequenos trechos de músicas.

1. Terapia sonora:

Ouçã, crie e baixe paisagens sonoras.

2. Terapias:

Encontre diferentes terapias para ajudar no relaxamento.

3. Aprender:

Encontre informações sobre o zumbido.

4. My Relief:

Acompanhe o uso do seu aplicativo.

Finalidade de uso do aplicativo:

O aplicativo tem como objetivo oferecer terapia sonora e exercícios de relaxamento para impedir o foco do paciente no zumbido. Pode ser usado no plano de gerenciamento de zumbido. Não se destina a uso em tratamento audiológico/ontológico de zumbido sintomático ou para mascarar ruídos internos.



Aviso de zumbido

Para evitar possível perda de audição, não use volume alto por longos períodos.



GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Em caso de dúvidas em relação à Diretriz de Equipamentos Médicos EU 93/42/EEC, entrar em contato com a GN ReSound A/S.

Avisos e precauções

Uso com aplicativos para dispositivos móveis:


As notificações de atualizações de aplicativos não devem ser desativadas, e recomenda-se ainda que o usuário instale todas as atualizações no aplicativo e sistema operacional para garantir o maior nível de proteção contra vulnerabilidades.

O aplicativo deve ser usado apenas com os aparelhos ReSound para os quais foi desenvolvido. A ReSound não se responsabiliza se o aplicativo for usado com outros aparelhos auditivos ou se aplicativos de terceiros forem utilizados para controlar os dispositivos ReSound. Aplique somente os pacotes de ajuste remoto que você espera receber para os seus aparelhos auditivos.

Avisos e precauções

Se for usar o aplicativo ReSound com o aparelho auditivo, leia primeiro o manual do usuário do aparelho auditivo. O manual do usuário acompanha o aparelho auditivo. Se precisar de outra cópia, consulte o atendimento ao cliente da ReSound.

Esteja ciente das informações assinaladas com um símbolo de advertência

 **ADVERTÊNCIA** indica uma situação que pode causar lesões sérias,
ATENÇÃO indica uma situação que pode causar lesões leves e moderadas.



Fabricante de acordo com a
Diretriz 93/42/CEE da UE sobre
Dispositivos Médicos:

Sede internacional

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
CEP: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715

Espanha

GN Hearing Care S.A.U
Poligono Industrial Prado Overa
C./Puerto de la Morcuera, 14-16
ES-28919 Leganés (Madrid)
Tfno.: +34 91 428 22 10
resound.es

Brasil

GN ReSound Ltda.
Rua do Paraíso,
139 - 6º, 7º, 8º e 9º andares
CEP: 04103-000 São Paulo
Tel.: +55 11 3016 8350
resound.com
faleconosco@gnresound.com.br

© 2019 GN Hearing A/S. Todos os direitos reservados. ReSound é uma marca registrada da GN Hearing A/S. Apple, a logomarca da maçã, iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é marca de serviço da Apple, Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. Android, Google Play e o logotipo Google Play são marcas registradas da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir do trabalho criado e compartilhado pela Google, e utilizado de acordo com os termos descritos na licença Creative Commons 3.0 Attribution License. A palavra e o logotipo Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc.

ReSound GN